

HS fåtöljen

2015




Ombonad miljö för avslappning

Fåtöljen är speciellt utvecklad för personer med Huntingtons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar. Den är dimensionerad för att stå emot de stora okontrollerade krafter personer med Huntingtons sjukdom ofta skapar. Trots det är stolen mycket bekväm tack vare mjuk och stabil polstring i flera lager. Sittbredden är smalt anpassad för att dämpa ofrivilliga rörelser och ge ombonat stöd. Sittsystemet kan ställas i lutning från rakt sittande till 57 graders lutning med gasfädersystem. När ryggen lutar följer sitsen med. Ryggen kan placeras i två höjdlägen. Stolen rullar lätt på hjul som kan bromsas. I standardutförande är klädeln i konstläder och som tillbehör finns avtagbar textilklädsel i Trevira som tvättas i maskin vid 40°. Båda klädselmaterialen är brandhämmande.

Stolen på bilden är kompletterad med HS kudden som presenteras på ett eget produktblad "HS kudden" och i Produktguiden för TUMLE kudden.

URIFORM

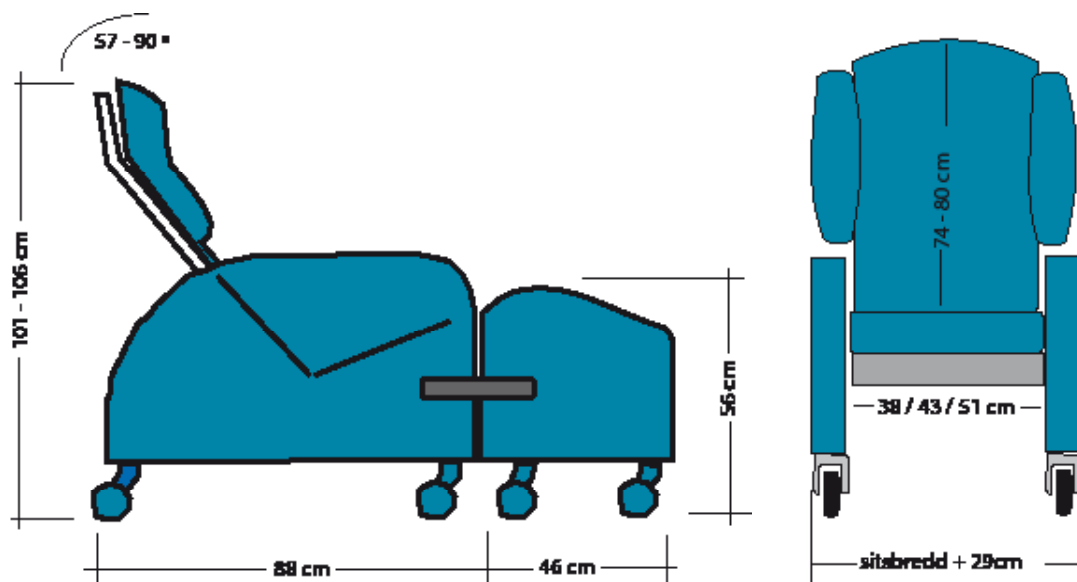

Produktioninformation

Längd med fotpall: 134 cm
 Längd utan fotpall: 88 cm
 Bredd: sitsbredd + 29 cm
 Höjd med ryggstöd: 101 alt. 106 cm
 Sitthöjd: 49 cm
 Fotpallens högsta höjd: 56 cm
 Sitsbredd: 38 / 43 / 51 cm
 Sittdjup: 47 cm
 Ryggstödshöjd: 74 / 80 cm
 Ryggstödslutning 90 - 57°
 Frigång över golv: 15 cm
 Hjul diameter: 10 cm
 Max brukarvikt: 150 kg
 Material klädsel: Konstläder avtorkas.
 Trevira maskintvätt 40°

Tillbehör

Höftbälte
 Bäckensele polstrad
 Fotplatta (vid förflyttning utan fotpall)
 D-ring fäste för höftbälte/bäckensele
 Huvudstöd/kudde med vikt

URIFORM

CE

Rätt till produktförändringar utan föregående avisering förbehålles.
 © URIFORM AB2015 1

URIFORM AB, Postflygsgatan 8 B, 128 30 Skarpnäck
 Tel: 08-7029774, Fax 08-6402957, e-post:order@uriform.se
 www.tumle.uriform.se